



Automatching von Ober- & Unterkiefer\*

Made in Germany

Direkte Steuerung per Touch

## Tizian Scan Touch

**Präzision trifft Benutzerfreundlichkeit** – Der Tizian Scan Touch ist die innovative Lösung für präzise digitale Scans in der Zahntechnik. Mit modernster Technologie, intuitiver Bedienbarkeit und einer Vielzahl an Funktionen.

### IHR Scanner für IHREN optimalen Workflow

#### 1. Leistungsstarke Software – effizient & sicher

- **Lokal gespeicherte Daten** – Keine Cloud-Anbindung, volle Kontrolle über Ihre Daten, DSGVO-kompatibel
- **Auto Artikulation\*** – Fügt beide Kiefer automatisch zusammen, kein Vestibulär-Scan mehr notwendig
- **Einfache Bedienung** – Intuitiv erlernbar und nahtlos kompatibel mit Ihrer **Tizian Creativ RT Software**
- **Flexible Scan-Modi** – Wählen Sie zwischen Normal- und HR-Modus (High Resolution) für höchste Präzision

#### 2. Kamera- und Scan-Technik

- **zusätzliche 3,2 Megapixel Kamera** – Hochauflösende Texturaufnahmen
- **Verstellbare Z-Achse** – Integrierter Drehteller für den Artikulator-Scan
- **Blaulicht-Technologie** – Blendfreies Licht (Gefahrenklasse 0) für komfortables und sicheres Arbeiten

#### 3. Touchdisplay für eine intuitive Bedienung

- **Vollfunktionsfähiges Touch-Feld** – TFT 5 Zoll Touch Display
- **Autarke Scanworkflows** – Scanauswahl und -tools direkt auf dem Display ohne PC-Steuerung

#### 4. Umfangreiches Zubehör und Features

- **Für Modellsysteme jeder Art** – Abdruckscan, secondDie, HD-Mode und vieles mehr

#### 5. Made in Germany

- **Vor Ort für Sie da** – Support und Service in Deutschland

\*Automatische Artikulation bei ausreichender Datenlage möglich

## Der Scanner in Zahlen & Fakten

### Scanzeiten in Sekunden\*





	Komplettkiefer	Einzelstumpf	3-Gliedrige Brücke
Scanzeit	12	25	40
Matching	10	6	15
Gesamt	22	31	55

### Technische Daten

Genauigkeit (ISO 12836)	4 µm
Lichtquelle	Streifenlicht-Triangulation, Hochleistungsblaulicht-LED
Abmessungen	431 mm x 432 mm x 398 mm
Gewicht	ca. 20 kg

\* Dies sind Minimalzeiten, die im Gebrauch abweichen können.

## Tizian Scan Touch Software

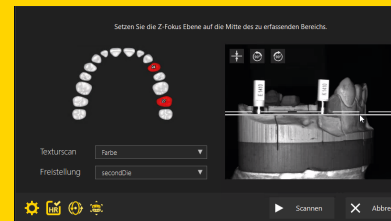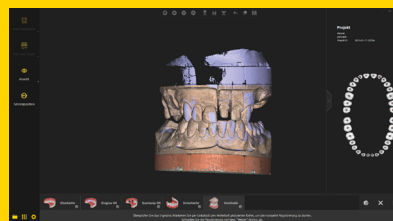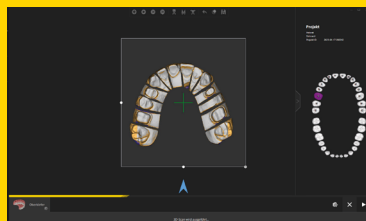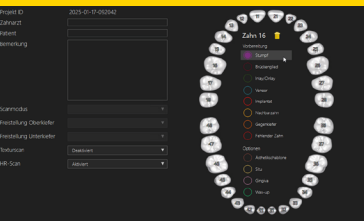

- Complete Digital Workflow voll integriert & perfekt abgestimmt
- EIN Ansprechpartner
- Wirtschaftlich und effizient
- Von Anwendern für Anwender
- Individuell auf Sie zugeschnittene Lösungen



Kennen Sie schon unseren Digital Workflow?  
Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.