


MicroClean

Jetzt
Angebot
anfordern!

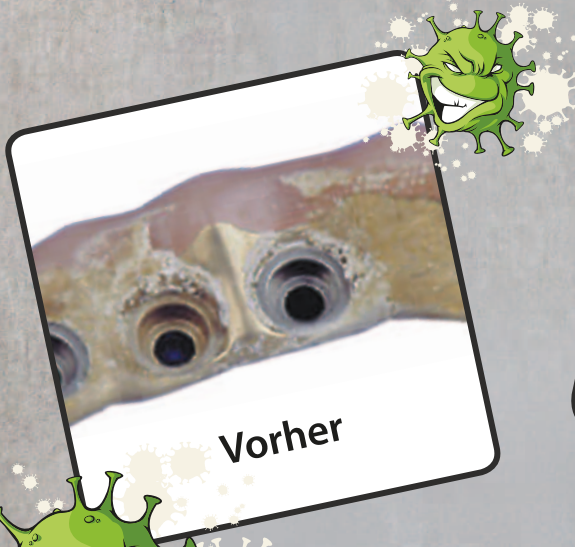

Lassen Sie das MicroClean-System die Arbeit machen und verdienen Sie das Geld!

Hygienische Reinigung von Prothesen, Kronen, Brücken und sonstigen zahntechnischen Arbeiten.

- **Schnell:** Duales Reinigungssystem (mechanische und chemische Reinigung in einem)
- **Schonend:** Speziell abgerundete Reinigungsnadeln schützen Ihre Arbeit.
- **Kompakt:** Passt in jede Zahnarztpraxis und jedes Labor.
- **Gesundheitsschonend:** Reinigen Sie alte Prothesen von Zahnstein und Verschmutzungen noch bevor Sie z. B. mit der Reparatur beginnen.



SCHÜTZ DENTAL
Micerium Group

... natürlich auch für KFO!

MicroClean

Endlich Schluss mit dem Polieren von Ekelprothesen!

Selbst stärkste Verschmutzungen wie Plaque und Zahnstein werden auch an schwer zugänglichen Stellen durch MicroClean mühelos automatisch entfernt.

Getragene Prothesen oder prothetische Neuanfertigungen werden nahezu ohne Zeitaufwand gesäubert und poliert – bis in die feinsten Interdentalräume, Fissuren und Teleskopspitzen.

Anwenderbericht:

www.sdent.eu/microclean



Vorher



Nachher

Produktbezeichnung	Art.-Nr
MicroClean Reinigungsgerät	676410
Nadeln kurz, 150 g	678866
Nadeln lang, 150 g	678865
Reinigungsfluid grün (säurehaltig), 500 ml	678857
Reinigungsfluid orange (universal), 500 ml	678855
Plastikbehälter, 500 ml	678820
Pinzette, 18 cm	678852
Haltemagnet komplett	678849
Messzylinder, 50 ml	676452
Info-Aufsteller	678860

Technische Daten:

Spannung:	230 V~
Leistung:	200 VA
Umdrehungen:	1450 U/min
Geräuschpegel:	< 65 dB (A)
Abmessungen (B x T x H):	185 x 175 x 195 mm
Gewicht:	7 kg



Vorher



Nachher

Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da:

Telefon: 06003 814-334

E-Mail: info@schuetz-dental.de

Abbildungen können abweichen.

SCHÜTZ DENTAL
Micerium Group

Schütz Dental GmbH • Dieselstr. 5-6 • 61191 Rosbach/Germany • Tel. +49 (0) 6003 814-0 • Fax +49 (0) 6003 814-906
www.schuetz-dental.de • info@schuetz-dental.de